

RS-3000 / RS-3000 Lite / RS-3000 Advance 1 et 2

LES BONNES PRATIQUES DE NETTOYAGE

Dans ce contexte inédit de COVID-19, NIDEK SA recommande le nettoyage des équipements d'ophtalmologie et des espaces de travail **entre chaque patient**.

Pour cela, NIDEK SA souhaite vous rappeler les bonnes pratiques de nettoyage des équipements NIDEK selon les manuels d'utilisation du fabricant.

Selon celles-ci, pour l'élimination du coronavirus sur les dispositifs NIDEK distribués par NIDEK SA (produits non critiques au regard des règles d'hygiène et de désinfection), NIDEK SA recommande l'utilisation:


- D'**alcool dénaturé avec une concentration d'au moins 70%** (directives AAO *1)
- De **lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi, virucides** et à base d'éthanol, et avec un temps de nettoyage relativement court selon les recommandations des fabricants de ce type de produit de nettoyage/désinfectant (se référer aux recommandations d'utilisation des sociétés des produits utilisés).

Il est nécessaire de veiller au respect des recommandations des comités et autorités scientifiques.

Une **attention particulière doit être portée à l'optique de l'appareil**:

- Les capteurs et l'objectif ont un protocole particulier et précis de nettoyage (détaillés ci-dessous)

Positionnement patient et environnement opérateur :

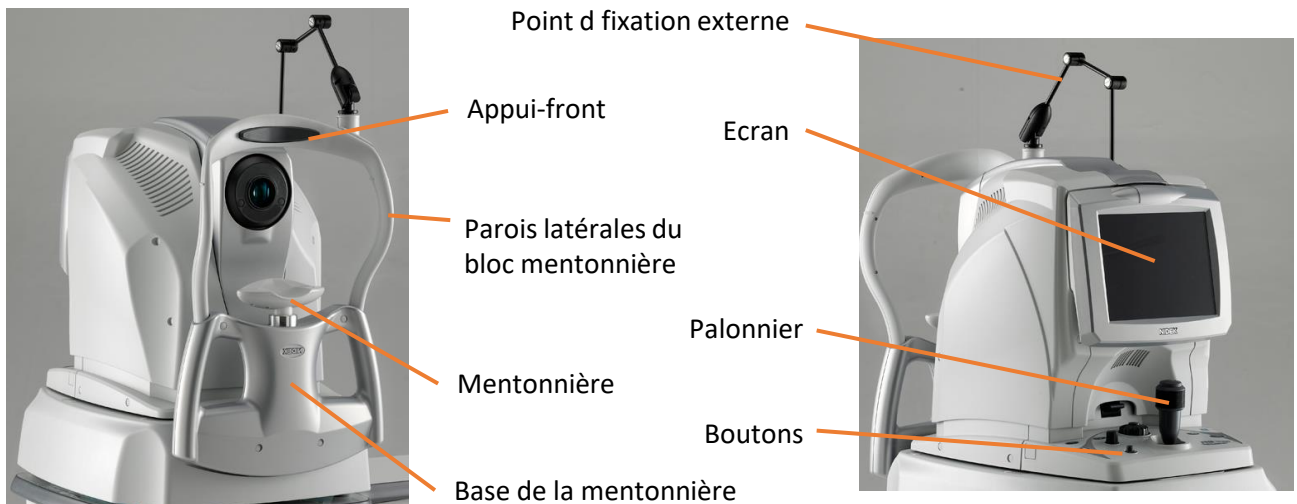

Entre chaque patient, NIDEK SA préconise de nettoyer **systématiquement** les parties suivantes :

- Les zones en contact direct avec la peau du visage du patient (appui-front et mentonnière)
- Les zones en contact indirect avec le patient (parois latérales et base de la mentonnière qui peuvent être touchées et souillées par les mains et le visage du patient)
- Les zones en contact direct et indirect avec l'opérateur (écran, palonnier, boutons, point de fixation externe)

Se servir de gaze propre ou d'un tampon de coton légèrement imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.


En cas d'utilisation de l'adaptateur de segment antérieur, nettoyer également l'appui-front additionnel selon les mêmes consignes.

*1 <https://www.aaopt.org/headline/alert-important-coronavirus-context>

RS-3000 / RS-3000 Lite / RS-3000 Advance 1 et 2

LES BONNES PRATIQUES DE NETTOYAGE

Partie optique de l'appareil :

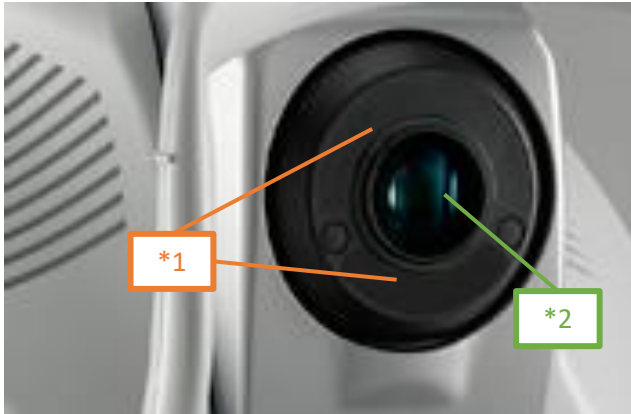

(*1) Fenêtres de capteurs latéraux

(*2) Fenêtre de l'objectif

NIDEK SA préconise le nettoyage systématique entre chaque patient, des surfaces (*1) (*2).

Ces éléments ne sont pas en contact avec le patient mais des poussières, traces ou d'éventuels postillons peuvent persister à ces endroits.

(*1) Pour les 2 capteurs latéraux :

Se servir de gaze propre ou d'un tampon de coton légèrement imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.

Également, ces éléments doivent rester propres, aucune poussière ni trace ne doit persister.

Ne pas hésiter à se servir d'un tissu sec à usage unique, non peluché, non granuleux et de type Kleenex pour essuyer ces surfaces afin de **les garder claires**.

(*2) Pour la fenêtre de l'objectif :

1. Retirer les poussières à l'aide d'une poire pneumatique.
2. Se servir d'un coton-tige légèrement imprégné d'alcool dénaturé pour nettoyer l'objectif. Faire des mouvements circulaires de l'intérieur vers l'extérieur. Pour cette opération, **ne pas se servir de lingettes nettoyantes et désinfectantes**.
3. Essuyez la fenêtre interne de l'objectif avec un coton-tige sec.
4. Vérifier qu'il n'y ait pas ni de trace d'alcool, ni de trace de gras et ni saleté. L'objectif doit **rester clair**. Si ce n'est pas le cas, réitérer l'étape 2.



En cas d'utilisation du **module de segment antérieur**, nettoyer également l'objectif de l'adaptateur de segment antérieur (côté patient *A) selon les mêmes consignes.

Pour la partie *B, qui peut entrer en contact avec le patient, se servir de gaze propre ou d'un tampon de coton légèrement imprégné d'alcool dénaturé ou de lingettes désinfectantes prêtes à l'emploi.

